


NEITZ


ハロゲンポケット型検眼鏡 GH ファイバー耳鼻鏡 FO

ハロゲンの明るい白色光とファイバーの同軸照明が特長の診断器セットです。

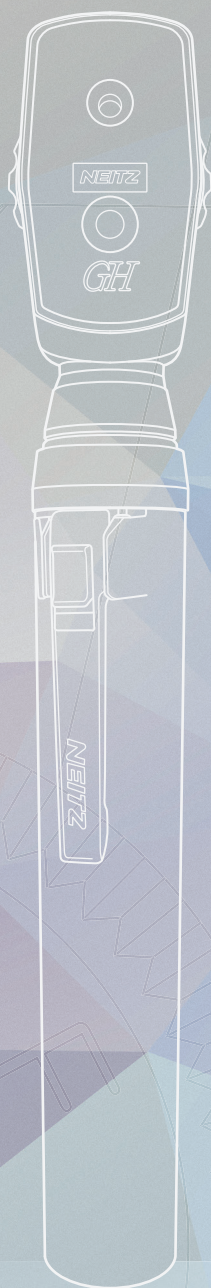

検眼鏡 GH

日本人に近視が多いことを考慮し、近眼用の補正レンズを多く組み込みました。よりの確なピントで眼底検査が行えます。

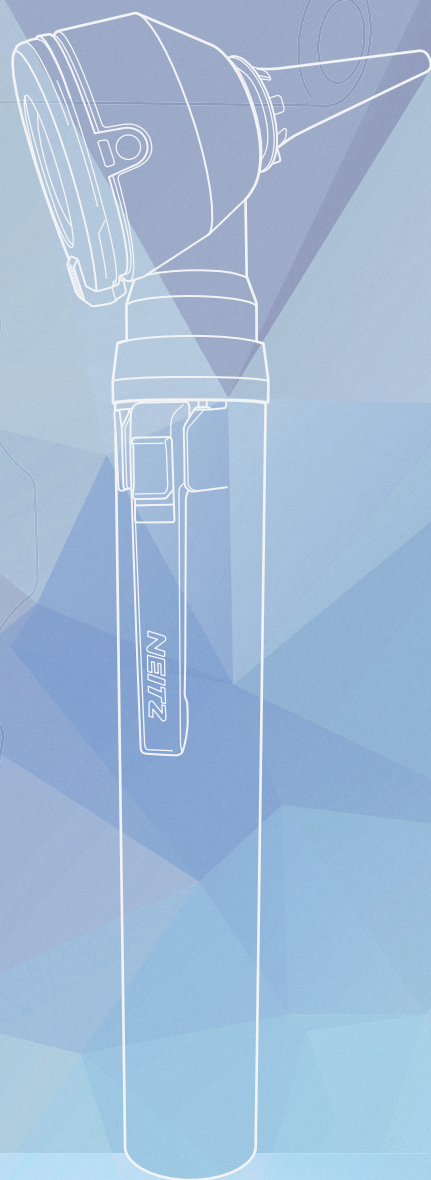

耳鼻鏡 FO

照明システムは、ハロゲン球とファイバーの組み合わせ。視野が一段と明るくなり、色温度の高い白色光が組織の色を判別しやすくしています。(明るさは当社従来製品の3倍です。)

ナイツハロゲンポケット検眼鏡 GH

近視の多い日本の実情を考慮し、マイナス補正レンズを多く配置。
使用しない時に光学系をほこりから守るダストシャッタ付き。

- 補正レンズ +15~-25（レンズディスクはエンドレスで両方向回転です。）
- 目盛ディスク F：無赤フィルタ（微細な眼底出血の検査）
 - ✱：固視標（中心窩外固視の検査）
 - ：通常の検査孔
 - ：小孔（小瞳孔、黄斑部検査）
 - ：半円孔（眼底の凹凸検査）

内 容	検眼鏡GH頭部、単三電池柄、単三形アルカリ乾電池×2、予備球(L-38)1個、ケース
電 球	GH球(L-38)
本 体 質 量	100g(電池含む)

製造販売届出番号：13B2X00131121901
一般医療機器 JMDN12817000

ファイバー耳鼻鏡 FO

3倍レンズはね上げ式を標準装備。
無反射のスペキュラで耳孔、鼻孔の深部まで明るく観察。
組織の色が的確に判別できるハロゲンファイバー光。

内 容	耳鼻鏡FO頭部(3倍レンズ付き)、スペキュラ(Φ2.5mmとΦ4mm各10個、スペキュラケース入り)、 単三電池柄、単三形アルカリ乾電池×2、予備球(L-69)1個、ケース
電 球	FO球(L-69)
本 体 質 量	110g(電池含む)

製造販売届出番号：13B2X00131121902
一般医療機器 JMDN41238000

検眼鏡・耳鼻鏡セット GH-FO

ハロゲンポケット型検眼鏡GHとファイバー耳鼻鏡FOをひとつのケースにセット。

内 容	検眼鏡GH頭部、耳鼻鏡FO頭部、単三電池柄×2、単三形アルカリ乾電池×4、 予備球GH用(L-38)とFO用(L-69)各1個、 スペキュラ(Φ2.5mmとΦ4mm各10個、スペキュラケース入り)
電 球	GH球(L-38)、FO球(L-69)
本 体 質 量	GH:100g(電池含む)、FO:110g(電池含む)

製造販売届出番号：13B2X00131121901
一般医療機器 JMDN12817000

製造販売届出番号：13B2X00131121902
一般医療機器 JMDN41238000

ナイツポケレチライト ORT-Y

- 赤キャップを先端の電球部分に被せることによって、色視野検査が可能です。
- ポケレチライトORT-Yは両眼視機能検査であるバゴリーニテスト、固視検査であるカバーテスト、ヒルシュベルグ法による眼位検査などがやりやすいようにペンライト先端が  のような形状になっています。
- レチノヘッドを取り付ければ簡易的なレチノスコープ検査ができるスポットレチノスコープになります。

内 容	ORT-Y本体、単三形アルカリ乾電池×2、赤キャップ×3、 電球(電池)交換レンチ、ケース
電 球	L-70
本 体 質 量	120g(電池含む)

製造販売届出番号：13B2X00131122201
一般医療機器 JMDN13372000

NEITZ

株式会社ナイツ

〒102-0082 東京都千代田区一番町15-21 一番町コート4階

TEL 03-3237-0551 FAX 03-3237-0554

<http://www.neitz.co.jp>

●製品改良のため、記載内容の一部を予告なく変更することがあります。

代理店



レチノヘッドを外した場合は、通常のペンライトとして使用できます。